


Kit per l'auto-raccolta di un campione di urina per il test di clamidi genitali e gonorrea, responsabili di malattie sessualmente trasmissibili. Il campione viene analizzato in laboratorio mediante PCR per la ricerca del DNA dei due patogeni. Il test è raccomandato per gli uomini dopo ogni rapporto sessuale a rischio di infezione. Per ottenere un risultato significativo, il test dovrebbe essere effettuato non prima di 14 giorni da tale rapporto sessuale.


Contenuto della confezione



Passo 1: Attivare il test online

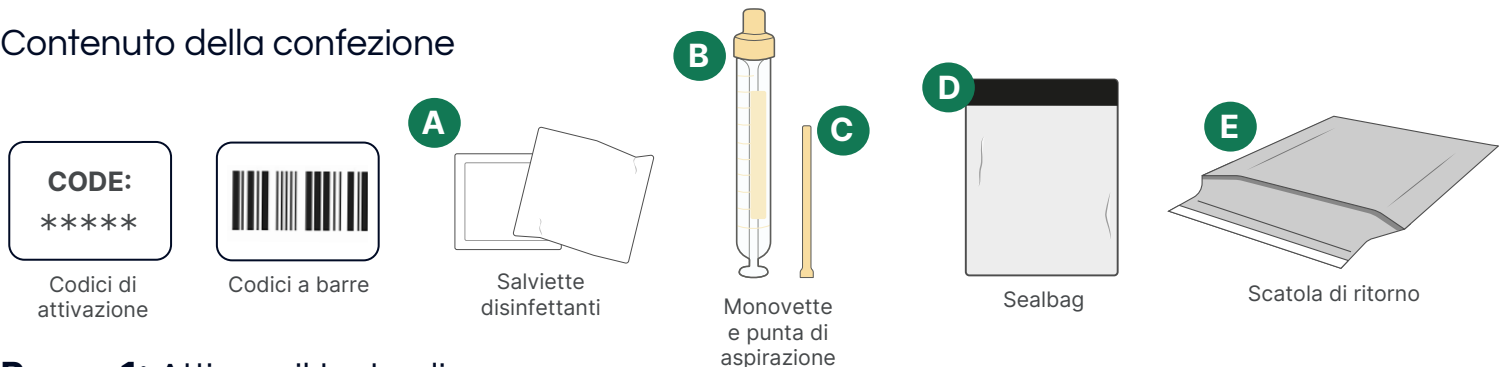


Effettuare il test non prima di 14 giorni dal rapporto sessuale a rischio di infezione.

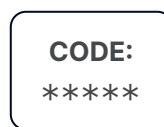

Inserire il codice di attivazione incluso su **360-health.ch** e rispondere alle domande di attivazione.

Passo 2: Prelevare un campione

- 1** L'ultimo passaggio in bagno dovrebbe essere più di un'ora fa. Lavati le mani. Apri il pacchetto di salviette disinfettanti **A** e usale per disinfettare le mani.
- 2** Prendi un bicchiere pulito e urina un po' direttamente dentro (primo flusso di urina!). Svuota il resto della vescica nella toilette.
- 3** Apri l'imballaggio del Monovette **B** e della punta di aspirazione **C**. Rimuovi il tappo del Monovette e mettilo da parte per dopo. **Non gettarlo via!** Collega la punta di aspirazione al Monovette (vedi immagine 1). Ora immergi la punta di aspirazione nel bicchiere di urina e riempi il Monovette fino al segno tirando fuori il pistone (vedi immagine 2).
- 4** Prendi il Monovette contenente l'urina fuori dal contenitore e giralo a testa in giù in modo che la punta di aspirazione punti verso l'alto. Tira fuori il pistone il più possibile in modo che la punta si svuoti. Spezza il pistone (vedi immagine 3) e rimuovi la punta di aspirazione. Rimetti il tappo per chiudere il Monovette e smaltisci il pistone e la punta di aspirazione.
- 5** Attacca il codice a barre incluso sul Monovette (vedi immagine 4). Metti il tubo di prova nella sealbag **D**. Chiudi la sealbag tirando via la striscia adesiva. Metti la sealbag nella scatola di ritorno **E** e chiudila (vedi immagine 5). Metti la scatola di ritorno in una cassetta delle lettere prima dell'ultima raccolta del giorno. **In caso di calore estremo o freddo estremo, utilizza una cassetta delle lettere protetta o un ufficio postale per la spedizione al laboratorio.**

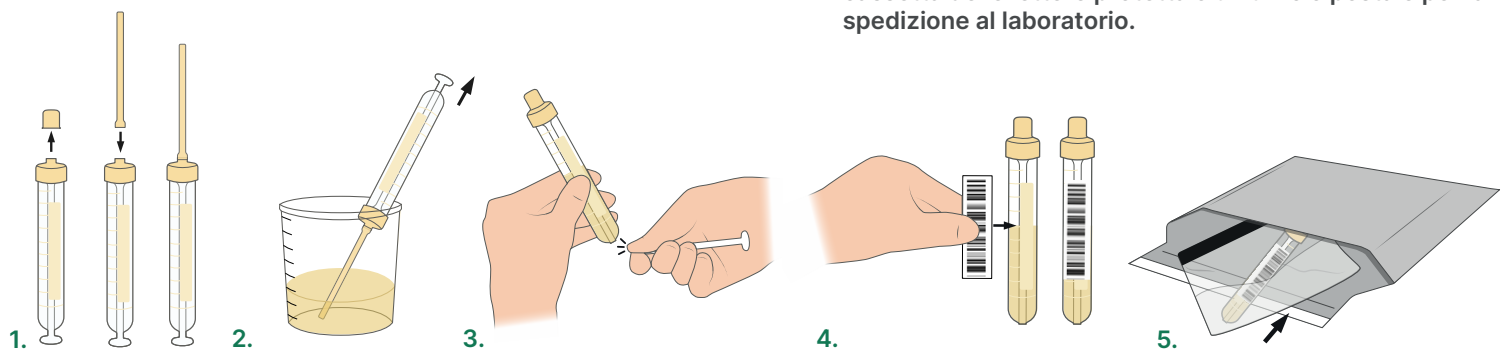

Passo 3: Risultati di laboratorio

I tuoi risultati saranno normalmente disponibili entro 2-3 giorni lavorativi dal momento in cui hai inviato il campione al laboratorio. Riceverai una notifica via e-mail quando i risultati saranno disponibili.



Questo prodotto è destinato all'uso singolo. Non utilizzare il test se l'imballaggio sterile del Monovette o il tubo stesso è danneggiato o se la data di scadenza (vedi confezione esterna) del test è passata. Richiedi un nuovo test contattandoci. Conservare e trasportare a temperature comprese tra 2 e 25 gradi. Eventuali incidenti gravi legati al dispositivo devono essere segnalati al produttore.



360-health.ch è un marchio di City Integration Switzerland GmbH, Rigiweg 21a, CH6343-Holzhausen. UID CHE-289.558.351.
E-mail: info@360-health.ch Sito web: www.360-health.ch

Analisi di laboratorio fornita da: A-Labs Switzerland GmbH, Kilchbergstrasse 6, CH-8134 Adliswil. Numero di autorizzazione Swissmedic: 512603-102704006